



技术参数

电源要求	100~240VAC, 50 / 60Hz, 200VA
速率范围	0.1~10ml/s
压力限制	325PSI
自动吸药速率	4ml/s
排气速率	A筒: 1.0ml/s B筒: 2.5ml/s
自动快进最大速率	9.9ml/s
注射延迟时间	1~300s
扫描延迟时间	1~300s
时相延迟时间	1~900s
最多注射相位	6
存储注射程序	100
历史注射记录	100
针筒容量	A筒: 1~65ml 或 1~115ml B筒: 1~115ml
多语言操作界面	

专业高品质附件



• 24VAC 电源箱



- 65ml, 115ml针筒用于造影剂注射
- 115ml针筒用于盐水注射

antmed

深圳市安特高科实业有限公司

深圳市 坪山新区 金辉路18号
东莞市 凤岗镇玉泉工业区 科技路46号

电 话: 0755-86060990 0769-82599182
传 真: 0755-86060991 0769-82860232
E-mail: sales@antmed.com http://www.antmed.com

选用安特医疗高品质产品,
你可以享受到:
无与伦比的售后服务;
精湛可靠的技术支持;
专业服务热线: 0755-86060990



最高可适用于3.0T MR环境



MR 高压注射器

Leading contrast delivery systems Forward

Partner For Life

antmed
安特医疗

MR高压注射器

ImaStar系列全新MR高压注射器，产品功能配置更齐全、性能更稳定，临床使用更加安全可靠



操作简便

- 一键吸药
- 可选配输液架

独立双马达系统

- 可实现A、B筒独立吸药、排气操作
- 可实现A、B筒独立注射



无需电池

真彩触摸屏

- 真彩12寸触摸屏
- 直观的用户界面、突出关键信息，帮助用户自信地完成操作


储存记录

- 可储存100套历史注射记录



实时压力曲线

- 提供实时压力曲线，监控压力变化，减低病人风险

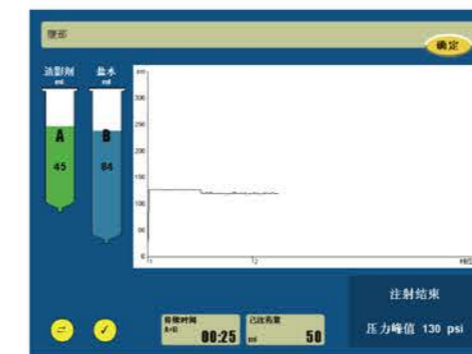


多种配置可选

- 可存储100套自定义注射方案，还可根据用户需要扩展存储注射方案



独立KVO模式

- 独立的KVO（保持静脉开放）功能利于集中精力于检查
- 可灵活设置KVO时间间隔
- 115ml 盐水针筒可保持更长KVO

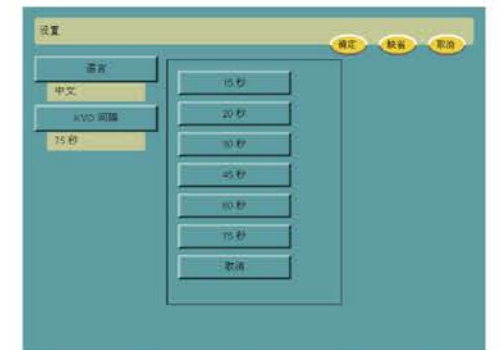

应用安全

- 排气与备妥键相互独立，双重确认，保证注射安全
- 在接近压限时，系统自动降速注射
- 如果超过压限，系统停止注射，并伴有文字、声音双重报警提示
- 机头防水设计，避免由于渗漏导致机头损坏，让临床使用安心无忧

蓝牙通讯